

Ormco™
YOUR PRACTICE. OUR PRIORITY.

symetri™
CLEAR


Повышенная прочность | Улучшенная эстетика | Легкое снятие брекетов



symetriTM
CLEAR

Совершенный эстетический брекет

Керамические брекеты Symetri Clear являются одной из новейших разработок среди эстетических брекетов. Отличаются повышенной прочностью, разработаны для комфорта пациентов и легкого, безопасного снятия.

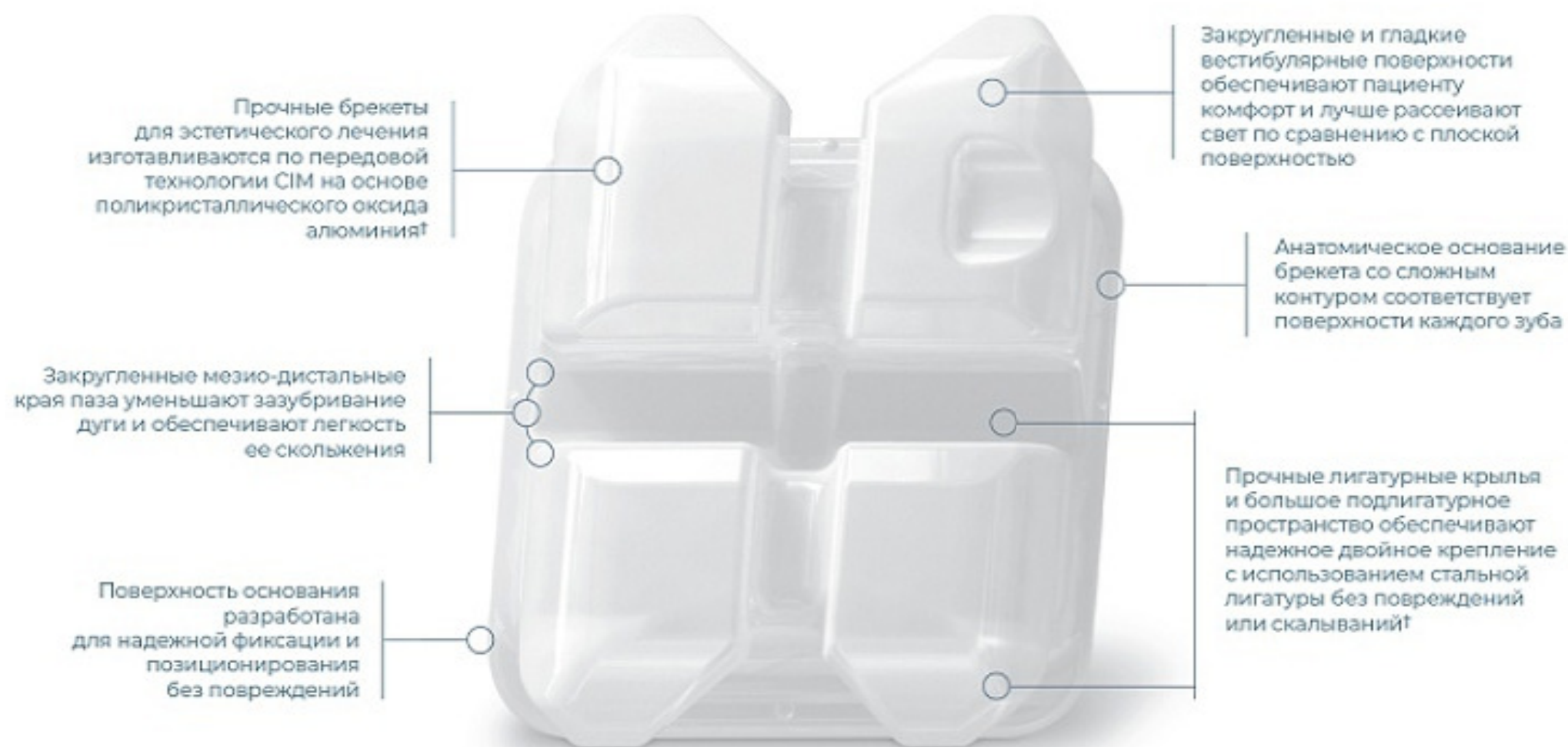

† Данные не опубликованы

Узнайте на практике легкость снятия

Запатентованная конструкция основания Symetri Clear и запатентованные щипцы для снятия брекетов обеспечивают безопасное, легкое и бережное удаление брекета. Брекет отходит от поверхности зуба целиком и с минимальным усилием.¹



Поверхность основания спроектирована таким образом, что брекет отходит от эмали зуба с минимальным усилием и целиком, без сколов^{††}



Запатентованная технология лазерной обработки основания обеспечивает высокую прочность поверхности фиксации

Анатомическое основание брекета со сложным контуром соответствует поверхности каждого зуба

¹ При использовании специализированного инструмента для снятия керамических брекетов

^{††} Данные не опубликованы

Создан для пациентов и врачей

Symetri Clear – это эстетический брекет, разработанный для комфорта пациента и отвечающий всем клиническим требованиям. Гладкие вестибулярные поверхности и низкий профиль минимизируют преждевременные окклюзионные контакты, что позволяет удобно позиционировать брекет на верхней и нижней челюстях.




- Паз со скошенным краем для легкого введения дуги
- Закругленные мезио-дистальные края паза уменьшают зазубривание дуги и обеспечивают легкость ее скольжения
- Закругленные контуры и форма лигатурных крыльев обеспечивают более гладкие края брекета, способствуя комфорту пациента
- Благодаря низкому профилю брекеты с меньшей вероятностью соприкасаются с эмалью других зубов
- Низкий профиль для эстетики и минимизации окклюзионной интерференции



Уникально подобранные параметры In/Out

Только компания Ormco предлагает брекет-системы Symetri Clear как со стандартным In/Out параметром, так и дополнительный тонкий In/Out параметр для боковых резцов верхней челюсти. Запатентованный компанией Ormco тонкий In/Out параметр разработан с целью выравнивания режущих краев центральных и боковых резцов, а также клыков, способствуя уменьшению количества детализирующих изгибов дуги и повышая результативность на заключительном этапе лечения. **

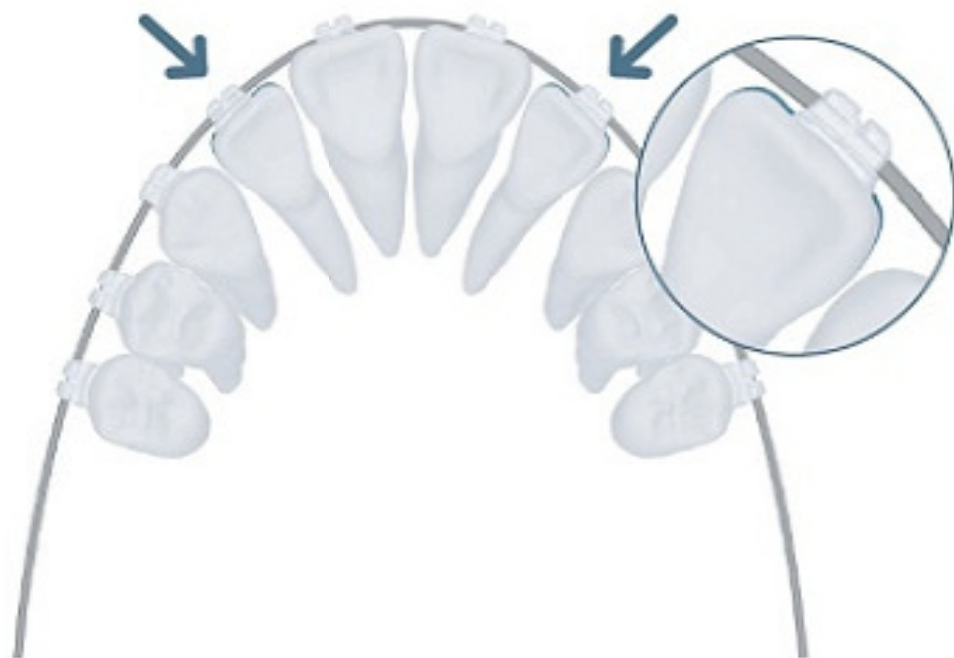

**Данные смоделированы на компьютере и не опубликованы



symetri™
CLEAR

- Повышенная прочность ■
- Улучшенная эстетика ■
- Легкое снятие брекетов ■

Брекеты Symetri Clear

Зуб	Торк	Ангуляция	Ротация	Тип брекета	Артикул			
Верхняя челюсть					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Центральный резец	+17°	4°	0°	двойной	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Боковой резец	+10°	8°	0°	двойной	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Боковой резец - тонкий In-Out	+10°	8°	0°	двойной	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Клык	0°	8°	0°	двойной	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Клык с крючком	0°	8°	0°	двойной	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Премоляр	-7°	0°	0°	двойной	418-1510		419-1510	
Премоляр с крючком	-7°	0°	0°	двойной	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
Нижняя челюсть					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Резцы	-6°	0°	0°	двойной	418-1010		419-1010	
Клык	0°	3°	2°	двойной	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Клык с крючком	0°	3°	2°	двойной	418-2411	418-2410	419-42411	419-2410
1-ый премоляр	-12°	0°	0°	двойной	418-1610		419-1610	
1-ый премоляр с крючком	-12°	2°	0°	двойной	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2-ой премоляр	-17°	0°	0°	двойной	418-1710		419-1710	
2-ой премоляр с крючком	-17°	2°	0°	двойной	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

