



ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ







ORMCO (ОРМКО) по праву считается одним из лучших производителей ортодонтических инструментов. Высочайшее качество изготовления продукции обеспечивает надежность, удобство в работе и долговечность эксплуатации.





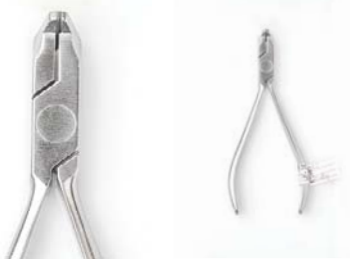

Основываясь на мнении и опыте практикующих врачей-ортодонт по всему миру, специалисты компании ORMCO постоянно совершенствуют технологии и предлагают новые модели инструментов.







С февраля 2014 года ORMCO запускает новую линейку инструментов. В общей сложности будут модифицированы 34 инструмента. Новинки будут иметь улучшенный дизайн в сочетании с аналогичными функциональными характеристиками предыдущих версий моделей. Кроме того, каталожные номера (артикулы) для данных 34 инструментов останутся прежними.





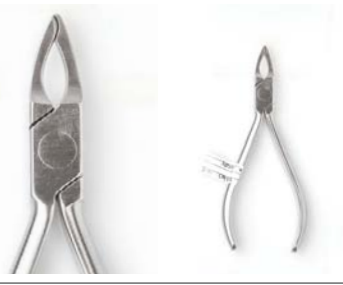

В ближайшее время прекращается выпуск 55 инструментов. В этом буклете мы объединили их в 18 групп. Каждой группе соответствует один из 34 модифицированных инструментов, который мы рекомендуем к использованию. Производство инструментов, не включённых в этот список, будет продолжено.




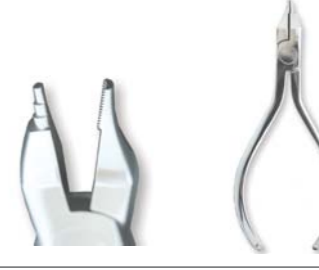

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул	Название	Особенности	Фото
800-1016	Универсальные дистальные кусачки (с захватом)	Кусачки для быстрого обрезания дуги с закругленной рабочей частью, заточенные с помощью алмазного инструмента, обеспечивают повышенный комфорт для пациента, что усиливается.	
800-0516	Дистальные кусачки с удлиненными ручками (с захватом)	Специальная конструкция позволяет щипцам обрезать дугу вровень с дистальным концом щечной трубки.	
800-1200	Жесткие кусачки для дуги, угловые, 15 градусов	Рабочие части расположены под углом 15 градусов к ручкам для облегчения внутриротового доступа.	
800-1001	Лигатурные кусачки прямые	Разработаны для легкого и эффективного обрезания мягких дуг и лигатур.	
803-0502	Уменьшенные лигатурные кусачки	Уменьшенный размер рабочей части инструмента для облегченного доступа к труднодоступным областям.	
803-0512	Уменьшенные лигатурные кусачки с удлиненными ручками	Сконструированы из прочной нержавеющей стали (хром-молибденовый сплав) для лучшей стабильности и устойчивости.	




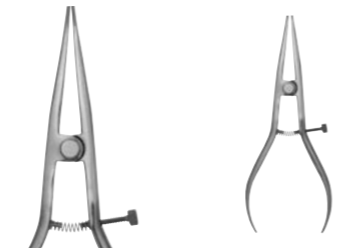

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
Артикул	Название	Особенности	Фото
800-1000	Уменьшенные лигатурные кусачки, угловые, 15 градусов	Рабочие части с еще более узким профилем, расположенные под углом 15 градусов к ручкам, для доступа к наиболее труднодоступным областям.	
800-1024	Кусачки микро (микро-кусачки)	Узкий профиль рабочей части для облегченного доступа к труднодоступным областям.	
803-0601	Щипцы Вейнгарта с узкими щечками	Суженные щечки, расположенные под углом 20 градусов к рабочей части, обеспечивают универсальность и удобство в работе при внутриротовом доступе.	
803-0408	Щипцы Хоу (прямые)	Превосходно сбалансированные, безопасные для губ, с зубчатыми щечками. Удобны для установки и снятия дуг, крючков и других приспособлений.	
803-0210	Щипцы для снятия адгезива	Специальный дизайн с укороченными щечками обеспечивает более легкий доступ к передним зубам. Используются для удаления избытка адгезива после снятия брекетов.	
803-0410	Щипцы для снятия адгезива AEZ	Одна щечка щипцов представляет собой опорную площадку из пластика, вторая выполнена в виде карбидного наконечника.	

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
Артикул	Название	Особенности	Фото
800-0345	Щипцы для снятия брекетов, прямые	Кончик инструмента вклинивается между краем брекета и поверхностью зуба, что позволяет безопасно и безболезненно снять брекет.	
803-0104	Щипцы для снятия брекетов, угловые	Клинья из кобальтовой стали позволяют эффективно снимать все виды брекетов как с передних, так и с боковых зубов, без деформирования крыльев брекета.	
800-0160	Щипцы для припасовки колец и коронок	Разработаны для припасовки стальных коронок. Путем последовательного контурирования и примерки временных коронок можно добиться их прочной фиксации на зубе.	
803-0413	Тройные щипцы	Жесткие щипцы с тремя щечками для припасовки различных рычагов. Также удобны для коррекции лицевых дуг и других жестких дуг.	
803-0414	Клювовидные щипцы	Рабочие грани щипцов хорошо заполированы, чтобы не деформировать дугу. Коническая и пирамидная части заточены до 0.8 диаметра на самом кончике, что позволяет придавать четкие углы изгибам.	
803-0415	Клювовидные щипцы для легких дуг с насечкой	Имеют удлиненную рабочую часть по сравнению со стандартными клювовидными щипцами, что позволяет создавать точные петли на легких дугах.	

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
Артикул	Название	Особенности	Фото
803-0121	Щипцы Твида для формирования петель	Щипцы для формирования каплевидных и омега-петель на дуге. Одна из щечек цилиндрической формы, вторая щечка имеет вогнутый контур.	
803-0125	Щипцы для прямоугольной проволоки	Щипцы для нанесения изгибов первого, второго и третьего порядков.	
803-0327	Щипцы для лингвальных дуг	Жесткие щипцы со специальными желобками для безопасного захвата лингвальных дуг. Идеальны для создания дистальных загибов и для введения дуги в лингвальные трубки.	
803-0122	Щипцы контурные	Щипцы позволяют плавно изменять форму дуги.	
803-0412	Уменьшенные тройные щипцы	Щипцы с закругленными кончиками для легкого изменения формы мягких дуг.	
803-0416	Клювовидные щипцы	Щипцы для нанесения изгибов на дуги и формирования петель. Одна щечка щипцов пирамидальной формы, вторая имеет конусовидную форму.	

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
Артикул	Название	Особенности	Фото
803-0405	Щипцы Нансе	Обе грани щечек округлые и ступенчатые для создания точных петель. Насечки у основания удобны для создания закрывающих петель, остальная часть рабочих граней аккуратно заполирована для предотвращения деформации дуги.	
800-0228	Щипцы для нанесения V-изгибов	Этими щипцами можно нанести 1 мм V-изгиб на любом отрезке дуги, который можно использовать в качестве стопора для предотвращения смещения дуги.	
803-0204	Щипцы для нанесения изгибов	Данные щипцы идеальны для создания закрывающих петель, а также для припасовки дуг. Вогнутая щечка помогает удерживать дугу от смещения.	
803-1404	Инструмент для омега-изгибов	Щипцы для нанесения каплевидных петель, омега-изгибов и закрывающих петель. Эти щипцы имеют цилиндрическую рабочую часть с тремя диаметрами.	
800-0805	Щипцы для торковых изгибов с ключом .018" / .022"	Щипцы для нанесения изгибов третьего порядка (торк) в пределах конкретного зуба без побочных деформаций соседних участков дуги.	

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул	Название	Особенности	Фото
803-0149	Инструмент для металлических лигатур	Бороздка инструмента автоматически блокирует концы лигатуры, тогда как кончик инструмента натягивает лигатуру без необходимости ее обвязывания. Идеальный инструмент для нанесения металлических лигатур.	
800-1010	Дистальные кусачки	Специальная конструкция щипцов позволяет обрезать дугу вровень с дистальным концом щечной трубки; для всех видов дуг.	
800-0804	Щипцы для торковых изгибов с ключом .016" / .018"	Щипцы для нанесения изгибов третьего порядка (торк) в пределах конкретного зуба без побочных деформаций соседних участков дуги.	
803-0145	Щипцы для установки сепараторов	Конструкция щипцов с загнутыми щеками позволяет легко устанавливать эластичный сепаратор. Валикообразные кончики не дадут соскочить сепаратору.	
800-0431	Щипцы для снятия лингвальных брекетов	Идеальны для безопасного снятия лингвальных брекетов и накусочных брекетов Bite Turbos. Щипцы имеют инновационный пружинный механизм, который повышает износостойкость и увеличивает амплитуду движения рабочей части, что повышает комфорт для пациента.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Группа	Артикул	Название	Артикул замены	Название замены
1	800-1116	ETM Дистальные кусачки (с захватом дуги) 1016	800-1016	Универсальные дистальные кусачки с захватом дуги
	803-0103	Дистальные кусачки с захватом дуги 103		
	803-0500	Уменьшенные дистальные кусачки с захватом		
	803-0511	AEZ дистальные кусачки с короткими ручками		
2	800-1017	ETM дистальные кусачки с длинными ручками 1016XL	800-0516	Универсальные дистальные кусачки с длинными ручками с захватом дуги
	803-0113	Дистальные кусачки с длинными ручками 113		
	803-0501	Дистальные кусачки «мини» с длинными ручками		
	803-0510	AEZ дистальные кусачки с длинными ручками		
3	803-0506	Жесткие кусачки для дуг (длинные)	800-1200	Жесткие кусачки для дуг
4	800-1100	ETM Жесткие кусачки для дуг 1000HWC	800-1001	Лигатурные кусачки
	800-7001	ETM кусачки для дуг .022X.028		
5	800-1002	ETM лигатурные кусачки 1002	803-0502	Уменьшенные лигатурные кусачки
	800-1003	ETM уменьшенные лигатурные кусачки		
	800-1021	ETM1021 легкие кусачки		
	803-0513	AEZ кусачки с укороченными ручками		
6	803-0503	Лигатурные кусачки (мини) с длинными ручками AEZ	803-0512	Лигатурные кусачки «мини» с длинными ручками
	803-0514	AEZ ONCE PIECE лигатурные кусачки с длинными ручками (15 градусов)		
7	800-1006	ETM1006 лигатурные кусачки 46 градусов	800-1000	Уменьшенные лигатурные кусачки (микро) 15 градусов
	803-0504	Лигатурные кусачки (микро) (15 градусов)		
	803-0505	AEZ лигатурные кусачки «мини» с длинными ручками (15 градусов)		
8	800-0156	ETM8011 Щипцы ютилита (Вейнгарта)	803-0601	Щипцы Вейнгарта узкие
	800-0158	ETM Щипцы ютилита (Вейнгарта)		
	803-0127	TWD Щипцы ютилита (Вейнгарта) DF-7		
	803-0401	Щипцы ютилита (Вейнгарта)		
	803-0446	Щипцы ютилита (Вейнгарта) лингвальные 446		
	803-4015	Щипцы ютилита (Вейнгарта) + 45 градусов 401-45		
	803-6011	Щипцы ютилита (Вейнгарта) узкие с длинными ручками		
9	800-1110	ETM0110 Щипцы ютилита (Вейнгарта) прямые	803-0408	Щипцы Хоу прямые
	803-0608	Щипцы Хоу прямые узкие		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Группа	Артикул	Название	Артикул замены	Название замены
10	800-0347	ETM инструмент для снятия колец с боковых зубов	803-0410	Инструмент для снятия колец с длинными ручками
	800-0348	ETM инструмент для снятия брекетов с подушкой (узкий)		
	800-0349	ETM инструмент для снятия брекетов с подушкой (широкий)		
	800-1347	ETM инструмент для снятия колец с боковых зубов LG347-L		
	803-0409	Инструмент для снятия колец с боковых зубов		
	803-0609	Инструмент для снятия колец с боковых зубов узкий		
	803-2410	AEZ инструмент для снятия колец с боковых зубов титаниум		
	800-1026	ETM 1026 инструмент для разрезания колец		
11	800-0346	ETM инструмент для снятия брекетов (широкий)	800-0345	Инструмент для снятия брекетов прямой
	803-0105	Инструмент для снятия брекетов прямой 105		
	866-4032	Инструмент для снятия брекетов Clear, Nexus		
12	803-0447	Инструмент для снятия лингвальных брекетов 447	803-0104	Инструмент для снятия брекетов угловой
	800-0344	(ETM 344) инструмент для снятия брекетов угловой		
	803-0520	Щипцы ютилити		
13	800-0200	ETM0200 тройные щипцы	803-0413	Тройные щипцы
14	800-0139	ETM Клювовидные щипцы 139	803-0414	Клювовидные щипцы
	803-0124	Клювовидные щипцы Твида DF-4		
	803-0417	AEZ Клювовидные щипцы короткие		
15	800-0350	ETM0350 щипцы для формирования петель	803-0121	Щипцы для формирования петель Твида
	803-0424	щипцы для формирования петель (404F-VERSION)		
16	800-0810	ETM щипцы для прямоугольной дуги Твида 810	803-0125	Щипцы для нанесения изгибов
	800-8100	ETM щипцы для прямоугольной дуги Твида		
	803-0402	Щипцы для нанесения изгибов -.075-402		
	803-0403	Щипцы для нанесения изгибов -.050-403		
17	800-2032	ETM контурные щипцы 203-B	803-0122	Контурные щипцы
18	800-0410	ETM0410 щипцы для преформирования лингвальных дуг	803-0405	Щипцы Нансе


Ormco
Your Practice. Our Priority.



INSIGNIA
СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ В ИСКУССТВЕ ОРТОДОНТИИ

ИНСИГНИЯ – комплексная система трехмерной цифровой ортодонтии

- Детализация эстетики конечного результата (CAD)
- Использование индивидуальных брекетов и дуг (CAM)
- Сокращение сроков лечения *

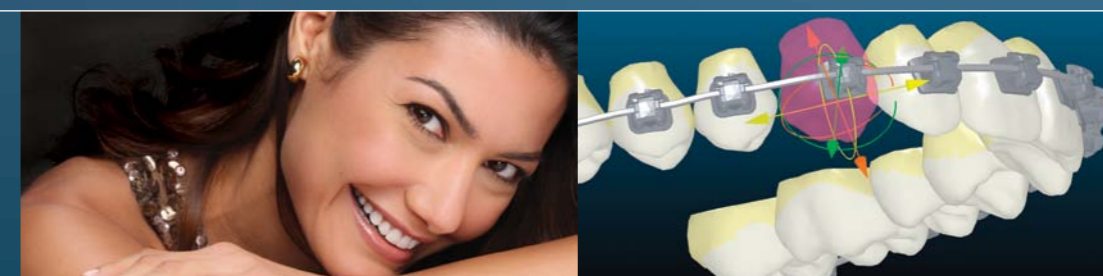

Официальное представительство ORMCO в России:
191186, Санкт-Петербург
Аптекарский пер., д. 6, офис 17 Н
www.ai.ormco.com/ru

Ваш персональный менеджер:
Юлия Лаврентьева
Тел.: +7 (812) 324-74-14, доп.: 133
Факс: +7 (812) 315-10-80
yulia.lavrentieva@ormcoeurope.com

*Результаты независимого исследования.
Weber II, Dennis J., Koroluk, Lorne D., Phillips, Ceib, Nguyen, Tung, Proffit, William R., "Clinical Effectiveness and Efficiency of Customized vs. Conventional Preadjusted Bracket Systems", Journal of Clinical Orthodontics, Volume XLVII, No. 4 (2013): 261-266.
Номер регистрационного удостоверения № ФСЗ 2010/08167 от 19 ноября 2010

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ВРАЧЕЙ

ШКОЛА ОРТОДОНТИИ ORMCO

Это практический курс, состоящий из 4 этапов. Занятия в школе включают лекции аккредитованных ORMCO специалистов, практические занятия и онлайн-поддержку, которая осуществляется на сайте www.orthodontia.ru.

АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ

Одно-, двух-, трёх- и четырёхдневные семинары, посвящённые актуальным практическим темам, связанным с применением современных технологий и методов лечения в ортодонтической практике.

КЛИНИЧЕСКИЕ КУРСЫ

Предназначены для начинающих или совершенствующих свою практику врачей-ортодонтотв. На курсах вы получите практические навыки работы с ортодонтическим оборудованием ORMCO, познакомитесь с последними технологиями ортодонтического лечения в современной стоматологической клинике при непосредственном участии опытных специалистов с многолетним стажем работы.

Узнать о мероприятиях можно по телефону: **+7 (921) 969-77-68**. Будем рады Вашему мнению о нашей работе и предложениям по ее улучшению по электронному адресу: opinion@ormcoeurope.com

Дополнительные услуги:

Позиционирование лингвальных брекетов STb



Стандартная процедура
11 900 рублей
(одна челюсть)

При помощи 3D-технологии Orapix:
Одна челюсть – 25000 руб.
Обе челюсти – 39600 руб.

Расширенная процедура
14 000 рублей

Специальные цены на первый заказ:
Одна челюсть – 19800 руб.
Обе челюсти – 18750 руб.

DAMON 2014 FORUM

12 и 13 октября

Санкт-Петербург,
конференц-зал «Кинотеатр» гостиницы «Англетер»
Исаакиевская пл., ул. Малая Морская, 24

12 октября,
начало в 10:00



ГАРСИЯ ЭСПЕХО

«Ключевые принципы системы Damon»

13 октября,
начало в 10:00



АНДРЕЙ ТИХОНОВ

«10 лет с Damon System. Чему мы научились»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДО 1 СЕНТЯБРЯ

Представительства компании ORMCO:

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Аптекарский переулок, д. 6
тел.: +7 812 324 74 14, факс: +7 812 315 10 80
e-mail: dc-sales@ormcoeurope.com

125167, Россия, Москва,
Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9
Тел.: (495) 664-75-55; факс: (495) 664-75-56